



## SOMNOcheck micro


### Inštrukcie pre pacienta na používanie prístroja

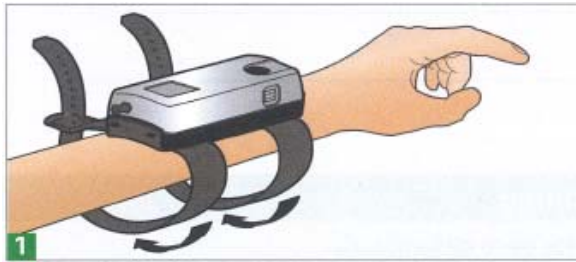


Upevnite zariadenie na predlaktie ľavej ruky. Kratší popruh je orientovaný smerom k dlani.

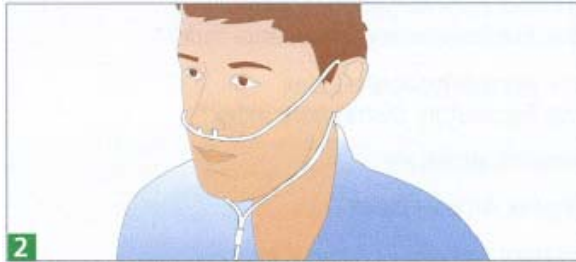


Zasunte konce diagnostickkej kanyly do nozdier. Hadičky vedte poza uši a pod bradou. Nastavte objímku na rozdvojení hadičiek tak, aby hadičky boli fixované proti posunu, avšak nie príliš tesne. Kanylu vedte k prístroju cez rukáv pyžama.

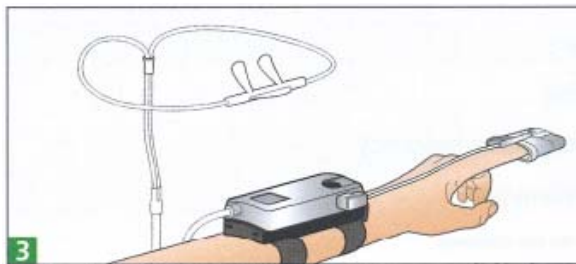

Zapojte diagnostickú kanylu do konektora, zasunte prst do snímača pulznej oximetrie tak, aby bol obrázok prsta smerom k Vám, na hornej strane snímača.

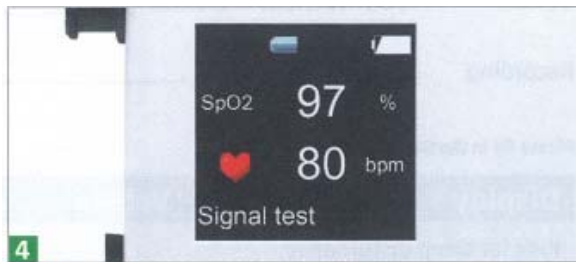

Stlačte tlačidlo na prístroji, zapne sa displej. Znova stlačte a držte stlačené tlačidlo na prístroji po dobu najmenej 5 sekúnd, pokiaľ sa na displeji neobjaví nápis „**Signal test**“

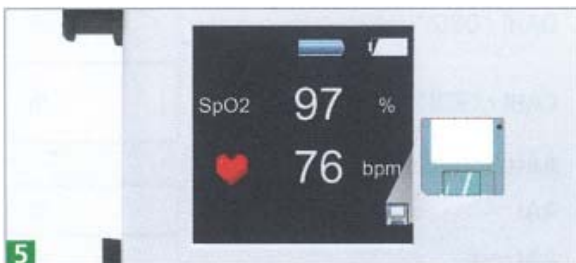

Následne sa na displeji objaví symbol diskety (viď obrázok č.5), záznam je aktivovaný, nestláčajte viac tlačidlo. Po krátkom čase displej zhasne, záznam je však aktívny.

Pokiaľ sa na displeji neobjaví symbol diskety, skontrolujte body 2 a 3 postupu a následne zopakujte bod 4. Záznam bude automaticky ukončený po 8 hodinách.

6

Ráno, resp. po 8 hodinách vytiahnite prst zo snímača, vyberte kanylu z nozdier a prístroj zložte z ruky. Prístroj zabalte do púzdra a doručte lekárovi.